

# Visit armbandsmottagare

BE8102



 Bellman & Symfon®



## Egenskaper

**Diskreta vibrationer**  
Tysta och diskreta larm

**Olikfärgade lysdioder**  
Lätt att skilja signalerna åt

**Bekväm att bära**  
Skonsamma materialval

**Enkel att anpassa**  
Utbytbart armband

**Laddare ingår**  
Utrustad med sängvibratoruttag

## Vid din sida, dag som natt.

Armbandsmottagaren från Bellman & Symfon är en del av Visits lösningar för smarta hem och hjälper dig hålla koll på signalerna hemma. Med diskreta vibrationer talar den om när dörren eller telefonen ringer, när din bebis behöver uppmärksamhet eller om en brand skulle inträffa.

Mottagaren är utrustad med ett silikonarmband som är skonsamt mot huden och kan bäras precis som ett vanligt armbandsur. Den har tydliga

symboler som tänds upp i olika färger beroende på vilken signal den tar emot. Bär den på armen för att alltid få reda på om något händer som kräver din uppmärksamhet.

Den medföljande laddaren har reservbatteri och en ingång för sängvibrator. Placera sängvibratort under kudden eller madrassen för att vakna av vibrationer om något skulle hända under natten.



# Teknisk information




## Mått och vikt

	Mottagare	Laddare
Höjd	49 mm	100 mm
Bredd	38 mm	95 mm
Djup	12 mm	117 mm
Vikt	27 g	185 g



## Knappar och reglage

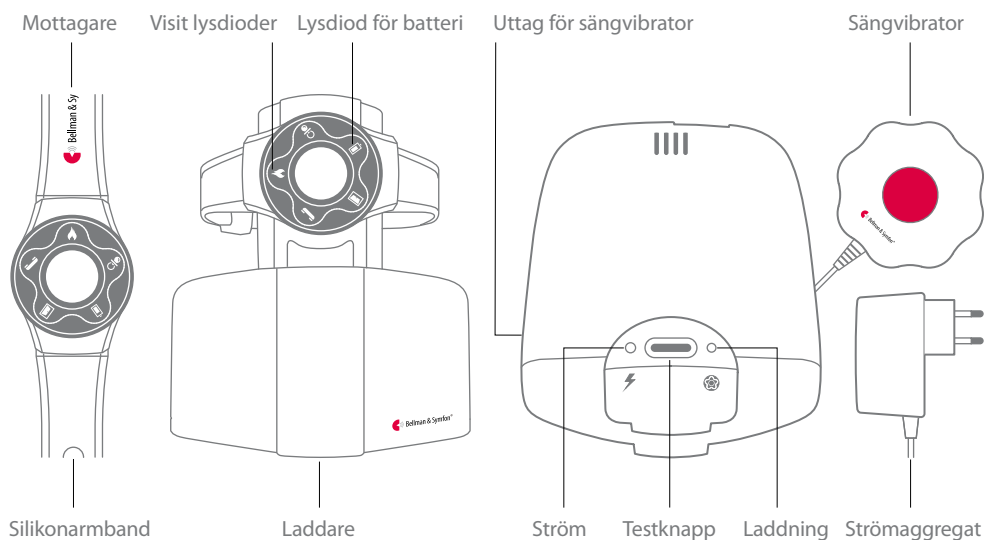

## Egenskaper

- Diskreta larm  
Avger tysta vibrationer som inte stör
- Tydliga signaler  
Använder olikfärgat ljus och vibrationsmönster
- Bekväm att bära  
Silikonarmband som är skonsamt mot huden
- Laddare ingår  
Utrustad med uttag för sängvibrator

## Frekvens och räckvidd

- Radiofrekvens: 868.3 MHz
- Räckvidd: Upp till 250 m fritt fält. Räckvidden reduceras av väggar, stora föremål och andra radiosändare som t.ex TV och mobiltelefon.

## Omgivning

- För inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 15°-35° C
- Relativ luftfuktighet:  
5% -95%, ej kondenserande

## Ström och batteri

- Med laddare  
7.5 V DC/1500 mA med strömaggregat
- Med batteri  
Mottagare: 1x1.2 V V40H uppladdningsbart batteri  
Laddare: 4x1.2 V NiMH uppladdningsbart batteri
- Strömförbrukning  
Mottagare: Aktiv 100 mA, viloläge 3 mA  
Laddare: Aktiv 650 mA, viloläge 70 mA
- Drifttid och laddningstid  
Mottagare: ~30 h, laddningstid: ~8 h  
Laddare: Laddningstid för reservbatteri ~24 h

## I paketet

- BE1560 Armbandsmottagare med extra armband
- BE1570 Laddare med strömförsörjning

## Regulatoriska krav

- Uppfyller följande regulatoriska krav:  
CE, FCC, RoHS, RCM, WEEE, Der Grüne punkt



## Visit lysdioder

Lysdioderna visar i vanliga fall följande:

- Orange lysdiod med en nappsymbol  
Visit Babymonitor har aktiverats
- Grön lysdiod med en dörrsymbol  
Visit dörrsändare har aktiverats
- Gul lysdiod med en telefonsymbol  
Visit telefonsändare har aktiverats
- Röd lysdiod med en eldsymbol  
Visit Brandvarnare har aktiverats

## Tillbehör

- BE1270 Sängvibrator
- BE9086 Extern trigg-kabel

© 2016, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE8102\_001DAS002

[bellman.com](http://bellman.com)